



DE Elektrischer Hornhautentferner CR 870

GB Electric callus remover CR 870

FR Râpe électrique anti-callosités CR 870

IT Rimuovi calli elettrico CR 870

ES Aparato eléctrico para eliminar durezas CR 870

PT Removedor de calosidades elétrico CR 870

NL Elektrische eeltverwijderaar CR 870

FI Sähkökäyttöinen jalkaraspi CR 870

SE Elektriska hornhudsborrtagare CR 870

GR Ηλεκτρική συσκευή αφαίρεσης κάλλων CR 870



Art. 88576



Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de manejo

Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!

Manual de instruções Por favor, ler cuidadosamente!
Gebruiksaanwijzing A.u.b. zorgvuldig lezen!
Käyttöohje Lue huolellisesti läpi!
Bruksanvisning Läses noga!
Οδηγίες χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.
SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET:

PERUSVAROTOIMENPITEITÄ TÄYTYY AINA NOUDATTA A
ELEKTRONISIA LAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ, ERITYISESTI LASTEN
LÄSNÄOLLESSA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneet tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- ÄLÄ KOSKAAN laita tappeja tai metallisia liittimiä laitteeseen.
- Tätä laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisävarusteita, jotka eivät ole MEDISANAin suosittelamia.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- ÄLÄ KOSKAAN pudota tai laita mitään esinettä laitteen aukkoihin.
- ÄLÄ käytä paikoissa, missä käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annetaan hapetta.
- ÄLÄ käytä peiton tai tyynyn alla. Ylikuumeneminen on mahdollista ja voi aiheuttaa tulipalon, tappavan sähköiskun tai henkilövahingon.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta. Laitte ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Lähetä laite huoltoon varten MEDISANAin huoltokeskukseen. Kaikki tämän laitteen huollot saa tehdä ainoastaan valtuutettu MEDISANAin huoltohenkilökunta.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan yksityistalouksiin, eikä kaupalliseen käyttöön.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. **Laitetta ei saa upottaa tai pudottaa veteen tai muihin nesteisiin.**

Takuu- ja korjausehdot

Käännä takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen mukana kopio ostokuitista.

Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:

1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvirioista johtuvat puutteet korjataan takuuajana maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuajaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle rakenneosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
 - a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim. käyttöohjeen noudattamatta jätetämisestä.
 - b. vahingot, joiden syyksi voidaan jättää ostajan tai asiattoman kolmannen osapuolen suoritama kunnossapito tai toimet.
 - c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
 - d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausvahingoista on myös pois suljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään takuutapaukseksi.

Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisäätöihin oikeuksiin.

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
SAKSA

VAROITUKSIA :


LUE TÄMÄ KAPPALE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- Jos saat helposti allergisia oireita tai jos sinulla on verenkiertohäiriöitä, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- Älä käsittele ihottuma-alueita, syyliä, luomia tai suonikohjuisia alueita.
- Laitteen käytön tulisi olla helppoa ja kivutonta. Jos tunnet kynnen ja ihon ärsytystä tai kädessäsi on epämiellyttävä tunne tätä laitetta käyttäessäsi, lopeta laitteen käyttö. Jos koet voimakkaampia oireita, ota yhteys lääkäriisi.
- Jos sinulla on sydämentahdistin tai olet raskaana, käänny lääkärisi puoleen ennen kuin käytät tätä laitetta. Käyttö ei ole suositeltavaa diabeetikoille.
- ÄLÄ käytä laitetta pikkulapsilla, invalideilla tai nukkuvilla tai tajuttomilla henkilöillä. EI SAA käyttää, jos iho on herkkä tai henkilöllä on heikko verenkierto.
- Jos laitteen käyttö aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Pidä huoli siitä, että kätesi ovat kuivat kun käytät säätimiä.
- Henkilöt, jotka ovat millään lailla rajoittuneita niin, että he eivät pysty käyttämään laitteen säätimiä, EIVÄT SAA KOSKAAN käyttää tätä laitetta.
- Pidä huoli siitä, että hiukset, vaatteet ja korut eivät missään vaiheessa ole lähellä laitteen liikkuvia osia.


PARISTO-TURVAOHJEITA

- Akkuja ja paristoja ei saa purkaa!
- Poista tyhjät akut ja paristot välittömästi laitteesta!
- Kohonnut vuotovaara, vältä kontaktia ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut akkuhapon kanssa kosketuksiin, huuhtelee vastaavat kohdat välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon!
- Jos paristo tai akku nielaistaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
- Aseta paristot oikein paikalleen, huomioi napaisuus!
- Pidä paristolokero aina suljettuna!
- Poista paristot ja akut laitteesta jos et käytä sitä pitkään aikaan!
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!
- Akkuja ja paristoja ei saa ladata! Räjähdyksivaara!
- Liitä oikein! Räjähdyksivaara!
- Älä heitä tuleen! Räjähdyksivaara!
- Säilytä käyttämättömät paristot pakkauksessa. Älä säilytä niitä metalliesineiden lähellä, ettei synny oikosulkuja!

Akkuja koskeva direktiivi

 Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

WEEE-selitys

 Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU-maassa. Kontrollioimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.



KÄYTTÖOHJEET:

Paristojen asennus

1. Avaa laitteen alapuolella oleva paristokotelo.
2. Laita paristot paristokoteloon merkkien (+ ja -) suuntaisesti. HUOMAUTUS! Paristot asetetaan yksi paristo kahden muun taakse.
3. Sulje paristotila.


Käyttö

1. Varmista, että jalkasi ovat puhtaat ja kuivat.
2. Valitse tehoasetus painikkeella: Herkkä tai pehmeä iho, valitse LO-asetus. Kovempi iho, valitse HI-asetus.
3. Laita rulla kevyesti painaen kantapäätä tai jalkapohjaa vasten ja liikuta laitetta hiljalleen käsiteltävällä alueella. HUOMAUTUS! Älä käytä laitetta 4 sekuntia pidempään samassa kohdassa.
4. Tarkista käsittelyn jälki huolellisesti. Kun olet tyytyväinen tulokseen, sammuta laite.
5. Huuhtelee jalat puhtaalla vedellä ja kuivaa ennen jalkavoiteen levittämistä.

Varoituksia

Varmista ennen käyttöä, että rulla on hyväkuntoinen. Jos siinä on epämuodostumia tai se on vääntynyt tai rikki, iho voi vahingoittua.


ÄLÄ PAINA LIIKAA ÄLÄKÄ TEE MITÄÄN SELLAISTA, MIKÄ SAA MOOTTORIN PYSÄHTYMÄÄN. PARAS TULOS SAADAAN, KUN LAITETTA LIIKUTETAAN IHOLLA KEVYESTI. NÄIN KUOLLUT IHO IRTOAA KEVYESTI, TURVALLISESTI JA TASAISESTI.

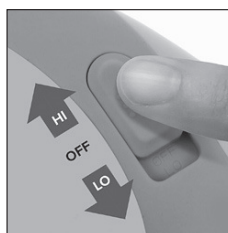

Rullien vaihto

Rullan irrotus

1. Varmista, että kytkin on OFF (pois päältä) -asennossa.
2. Paina yhdellä kädellä laitteen sivussa olevaa avauspainiketta.
3. Ota rulla pois toisella kädellä. VINKKI! rulla lähtee pois helpommin vapautuspainikkeen päästä.

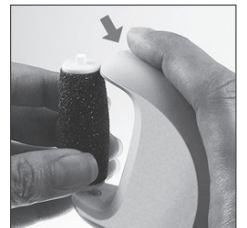

Uuden rullan asennus

1. Aseta toinen rullan tapeista kevyesti vapautuspainikkeesta kauimpana olevassa päässä olevaan syvennykseen.
2. Paina rullan oikea puoli paikalleen uria pitkin.
3. Rullan lukittuessa paikalleen kuuluu naksahdus.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- Sammuta laite ennen puhdistamista.
- Puhdista vain kuivalla liinalla. Älä käytä kemiallisia aineita, kuten bentseeniä, alkoholia jne.
- Poista paristot, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristoja viileässä ja kuivassa paikassa sekä auringonvalolta että metalliesineiltä suojattuna.
- Jos moottori käy heikosta, vaihda paristot.
- Jos rullan pinta on kulunut tai ei hio kunnolla, vaihda tilalle uusi rulla.

SERVICE

Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.

CR 870 - Tuotenro.: 88576 / EAN koodi: 40 15588 88576 3